

取扱説明書

マッサージベッド・コンパクトサイズ

商品コード : WF004561

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。商品を末永く安全にご使用いただく為に、この「組立説明書」をよくお読み頂き、内容をよくご理解していただいたうえで、正しく組立、ご使用いただけるようお願いします。

組み立て手順



1. ベッドをゆっくり開きます



2. 付属品を取り出します。



3. ベッドの足を引き出します。



4. ベッドを裏返して起こします。



5. アームレストを取り付けます。



6. ヘッドレストを取り付けます。



7. アームマットを取り付けます。



完成！

ヘッドレストの使用方法



- ① 差込穴の奥までにヘッドレストを差込みます。
- ② ご希望の位置に調節し、レバーを反対側に押し、ロックしてください。
- ③ ヘッドレストとフェイスマットのマジックテープを貼り合わせてください。
- ④ 設置完了です。




ご使用の前に必ずお読みください。

- ご使用前に必ず確実にロックされているかをご確認ください。
- 施術中にロックが外れる恐れがあります。ご使用中は十分にご注意ください。
- 土台についているレバーは固定する・解除する以外の動作はせず、絶対に回さないでください。
- 万一、ヘッドレストのレバーが一硬すぎるようなら、レバーを固定したまま反時計回りに回します。レバーが、緩すぎる場合には、レバーを固定したまま時計回りに回します。固定を解除状態であっても、レバーを極端に回しすぎないようにご注意ください。ヘッドレストが緩みすぎたり・硬くなりすぎてしまい、使用することができなくなります。
- 施術などをお受けのお客様が、無意識にレバーに触れフェイス部のロックを解除し、危険な事故につながる可能性があります。必ず下記画像のレバー位置にて誤使用ください。



脚部高さの調節方法

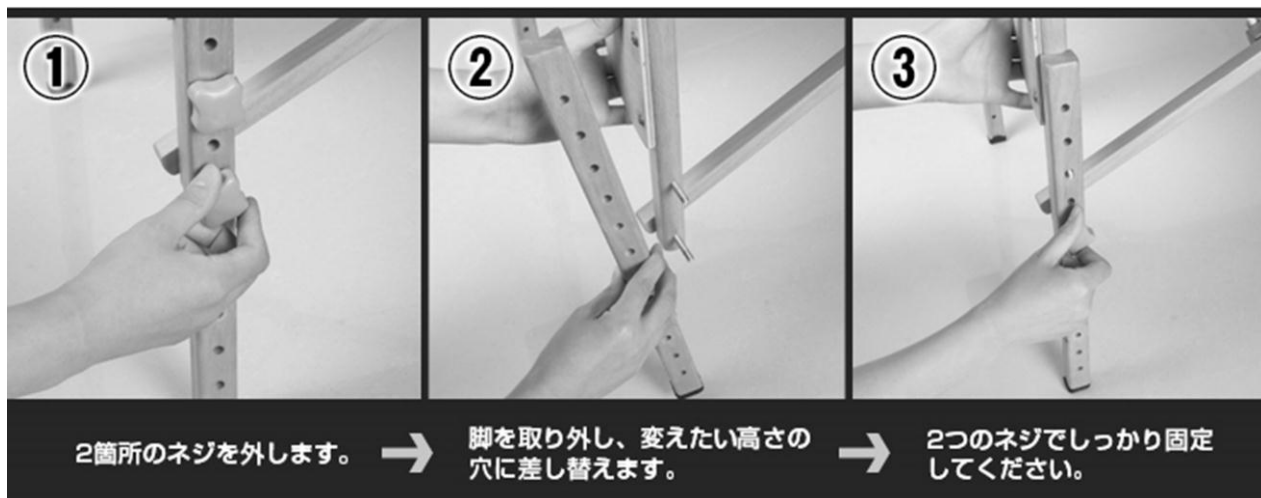

マッサージベッドのケアの方法：

- 6 ヶ月おきにネジやボルトを確認し、緩んでいる場合にはしっかりと締め直してください。
- 風通しの良い場所で保管し、湿気の多いところはお避け下さい。
- 生地を痛める恐れがあるため、寒いあるいは暑い場所にテーブルを放置しないで下さい。
- ベッドを車内に放置、保管することはご遠慮下さい。生地の質を守ったまま長時間ご使用になるためにも、保管および移動にはキャリーケースをご利用下さい。また、生地の劣化やキズを防ぐため、必ずシーツやパッドをご使用下さい。
- お掃除には洗剤をぬるま湯に溶かし柔らかい布に染み込ませたものを使用して下さい。
- 汚れが残っている場合には、磨耗防止タイプのクリーナーを布に染み込ませてご使用ください。洗剤やクリーナーを使用してお掃除した後は、水拭きしてから柔らかい布で湿気を拭き取ってください。